




SINCE 1966  
MADE IN ITALY

# AeroFlaem

by FLAEM®

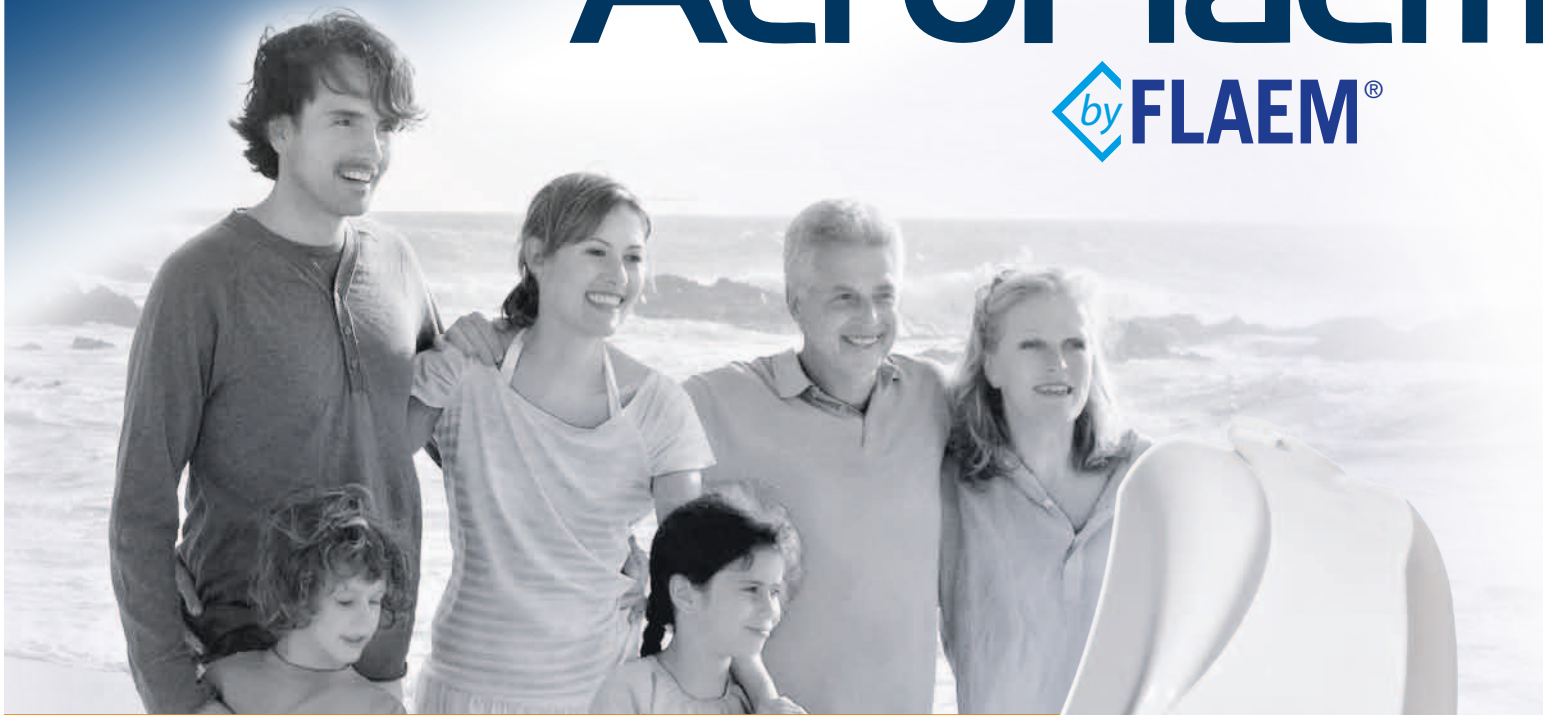

**Aerosol per terapia generica**  
**Aerosol therapy**  
**unit for seasonal use**

**Veloce, Silenzioso, Confortevole**  
**Speed, Silence, Comfort**

**Compatto**  
**Compact**

**Uso continuo**  
**Continuous use**

**Massima igiene, cavo di alimentazione separato dal vano accessori**  
**Power cord storage separated from the accessories compartment for increased hygiene**



[www.flaem.it](http://www.flaem.it)



Nuova Ampolla RF7 a due velocità di erogazione del farmaco  
*New RF7Dual Speed nebulizer with 2 delivery modes*



Nuova Mascherina Adulto Soft Touch dotata di morbido bordo a contatto con il viso  
*New Soft Touch adult mask*



Comodo vano porta accessori igienicamente separato dal vano raccogli cavo  
*Convenient accessories compartment*



Vano raccogli cavo  
*Cord storage compartment*



Utile maniglia per il trasporto  
*Convenient carrying handle*

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

**AeroFlaem**  
by **FLAEM**

Uso Use	Continuo Continuous
Alimentazione/Potenza Power supply/Power	230 V ~ 50 Hz/130 VA Other voltages available on request
Filtraggio aria Air filtering	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is taken external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
Portata aria al compressore Compressor air output	9 l/min (approx)
Pressione Max   Max pressure	1.8 ± 0.3 bar
Rumorosità (a 1 m) Sound level (at 1 m)	57 dB (A) (approx)
Dimensioni Dimensions	27 (L) x 19 (P) x 11 (H) cm 27 (length) x 19 (width) x 11 (height) cm.
Peso apparecchio Handset Weight	1.7 Kg
Garanzia Warranty	5 anni Please refer to your local dealer

## OMOLOGAZIONI APPROVALS

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)	
In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	
Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)	
Codice Code	NA15P00
Imballo Master carton	n° 6 pz. 6 pieces

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

**RF7**  
by **FLAEM**

Ampolla / Nebulizer	Selettore velocità Speed selector	
	MIN	MAX
Erogazione ml / min <sup>(1)</sup> Delivery ml / min <sup>(1)</sup>	0.25	0.55
MMAD <sup>(2)</sup>	3.78 µm	4.58 µm
Frazione respirabile < 5 µm <sup>(2)</sup> Breathable fraction < 5 µm (FPF) <sup>(2)</sup>	63.0%	54.4%
Capacità massima <sup>(1)</sup> Maximum fill volume <sup>(1)</sup>	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5.  
I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.  
(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5  
Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity

(2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.  
(2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORIES

Set Ampolla RF7 Dual Speed composto da: ampolla e boccaglio RF7 Dual Speed Nebulizer Set composed of: nebulizer and mouthpiece
Mascherina Adulto Soft Touch Soft Touch Adult mask
Nasale adulto Adult nasal prong
Nasale Pediatrico Paediatric nasal prong
Tubo di collegamento da 1 m 1 m connection tube
Comando manuale di nebulizzazione Drug saving device

Patented Product and PCT International Patent Pending

14185B0-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

SINCE 1966  
MADE IN ITALY  
**FLAEM**  
a healthy lifestyle

Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storic, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system

CERTIFICATO N. 9120/FLAE  
CERTIFICATO N. 9124/FL02

Export Department of FLAEM NUOVA  
  
3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769  
Fax (39) 02 48376295  
E-mail: info@medexpointernational.com

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

Numero Verde  
**800 236622**  
SERVIZIO CLIENTI FLAEM