

*il naso libero
in un attimo*

Rhino Clear Mobile

 **FLAEM**[®]

 over 40 years 
MADE IN ITALY



Rhino Clear Mobile

è **FLAEM**®

*il naso libero
in un attimo*

over 40 years
MADE IN ITALY

Doccia nasale adatta a tutte le età

Studiata per il lavaggio
e il trattamento delle cavità nasali

Utilizzabile con soluzioni saline
e con farmaci per terapia aerosolica

Pratica e veloce

Cordless con batteria ricaricabile



1

Adattatori nasali in materiale morbido per un confort ottimale della doccia nasale. Si adatta a tutte le età.

A: fino a 3 anni
B: 3 - 10 anni
C: oltre 10 anni



2

Base di RHINO CLEAR MOBILE munita di un comodo vano porta adattatori nasali igienicamente separato dal corpo doccia.



3

Cordless con batteria ricaricabile: Per ricaricare RHINO CLEAR MOBILE è sufficiente appoggiare il cordless sulla base, che è dotata di una particolare tecnologia adatta per un utilizzo in ambienti umidi (es. lavandino, bagni).



Doccia nasale ricaricabile, permette un lavaggio nasale molto efficace e libera il respiro

Una corretta igiene nasale è alla base di un'efficace prevenzione delle affezioni dell'apparato respiratorio. Il naso costituisce il filtro dove l'aria ambiente entra in contatto con il nostro corpo e viene filtrata dalle particelle di dimensioni più grandi. Esattamente nello stesso modo in cui una buona igiene orale previene l'insorgenza di problemi all'arcata dentale, una buona igiene nasale determina **un libero afflusso ai polmoni di aria più pulita**. Questo si traduce in una maggiore resistenza a tutte le patologie da raffreddamento o polmonari. Il trattamento con doccia nasale eroga una nebulizzazione specifica per rimanere nell'ambito dei distretti del rinofaringe, e che non scende sino ai polmoni come farebbe il nebulizzato generato dai normali apparecchi per aerosol, che, diversamente dalle docce nasali, sono progettati per permettere al farmaco di scendere sino agli alveoli polmonari.

Le docce nasali sono particolarmente adatte al trattamento delle rino-faringiti, permettendo la rimozione di eventuali essudati mucosi che nel bambino rappresentano un problema non trascurabile.

Flaem presenta l'innovativa doccia nasale RHINO CLEAR MOBILE, pratica e facile da utilizzare, sostituisce i più ingombranti apparecchi per effettuare il vostro lavaggio nasale quotidiano; RHINO CLEAR MOBILE permette un lavaggio dalla micro-nizzazione specifica e costante per le vie aeree superiori (rinofaringe). Il lavaggio non necessita dell'utilizzo di farmaci e viene normalmente effettuato utilizzando le comuni soluzioni fisiologiche isotoniche e ipertoniche. Il lavaggio nasale è **efficace e confortevole sia nell'adulto, che nel**

bambino anche grazie ai tre adattatori nasali realizzati in materiale morbido, di cui RHINO CLEAR MOBILE è fornito di serie.

Il trattamento con la doccia nasale è molto ben tollerato dai bambini e, da uno studio effettuato dalla prof.ssa B. Bergamini della Facoltà di Pediatria dell'Università di Modena e Reggio Emilia, risulta che *"Nel bambino con rino-sinusite cronica, praticamente tutti i sintomi risultano migliorati già dopo la prima settimana di trattamento e dopo la terza settimana il miglioramento è ulteriormente evidente"*.

La Doccia Nasale Flaem RHINO CLEAR MOBILE oltre a proteggere la salute del vostro respiro, non ha particolari controindicazioni, infatti è realizzata in **materiali Biocompatibili e anallergici (testati dai laboratori Biochem)**.

Rispetta infine l'ambiente, per l'adozione di componenti conformi alle direttive cogenti. La continua ricerca Flaem per la sicurezza dei propri prodotti ha condotto alla realizzazione di RHINO CLEAR MOBILE **senza l'utilizzo di Ftalati nei materiali plastici** di produzione secondo la direttiva 93/42/CEE e successivo aggiornamento 2007/47/CE. Gli Ftalati sono sostanze chimiche utilizzate nella lavorazione delle plastiche riguardo le quali numerosi Stati Membri dell'Unione Europea (Italia compresa) hanno adottato raccomandazioni intese a ridurre o a limitare l'impiego di dispositivi medici contenenti Ftalati pericolosi sui bambini, sulle donne incinte e in allattamento e su altri pazienti a rischio.



4

L'ampolla, disponibile come accessorio, consente una completa personalizzazione dell'apparecchio per ogni membro della famiglia.

Per una corretta igiene e prevenzione dei contagi, si consiglia l'utilizzo personalizzato dell'ampolla.



5

Borsa da trasporto per portare RHINO CLEAR MOBILE sempre con te.



6

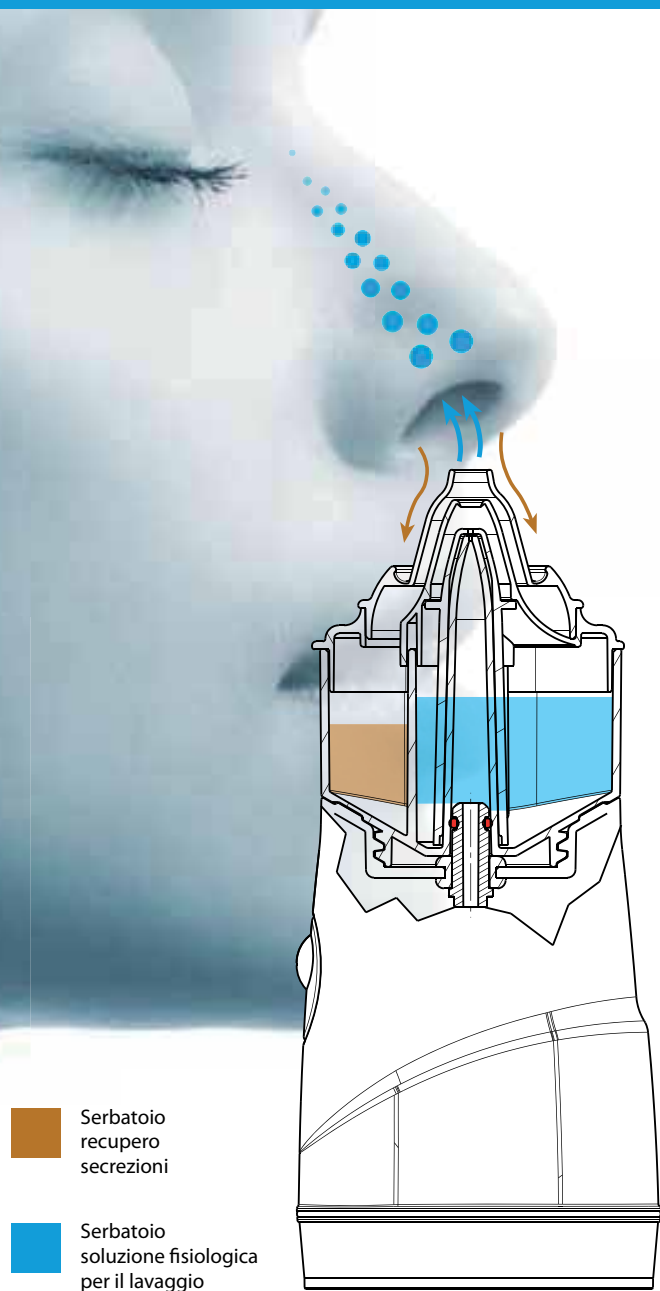
Simpatico adesivo applicabile al corpo dell'apparecchio per divertire i bambini durante la somministrazione della doccia nasale.

Rhino Clear Mobile


è **FLAEM**®

il naso libero in un attimo


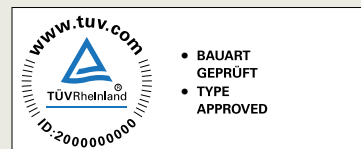
Schema di funzionamento



 Serbatoio recupero secrezioni

 Serbatoio soluzione fisiologica per il lavaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione base di ricarica	230V - 50Hz
Potenza assorbita in ricarica	2 W
Tipo di ricarica	permanente
Camera di nebulizzazione	da 15 ml max estraibile e completamente lavabile
Tempo di nebulizzazione di 10 ml di NaCl	circa 2 minuti (1 ml in circa 12 secondi)
Dimensioni doccia nasale	7x6x15,5h cm
Peso doccia nasale	210 g
Conforme alla direttiva 93/42/CEE	
Omologazione (secondo la norma EN 60 601:1:2006 III edizione)	
Dimensioni base di ricarica	15x9x8h cm
Peso totale (base di ricarica completa di apparecchio e accessori)	480 g

Patented and Patent Pending Product

Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate.

over 40 years
MADE IN ITALY
FLAEM®
il benessere è di casa

Fabbricante:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168
Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it

**NUMERO VERDE**
800 - 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM NUOVA

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato

