



Termometro con Galinstan,  
la esclusiva lega di Gallio,  
Indio e Stagno - il sostituto  
ecologico del mercurio

*Thermometer with Galinstan,  
it is a gallium, indium  
and tin exclusive alloy -  
the ecological mercury  
substitute*




Anallergico, senza Nickel e PVC

*Anti-allergenic  
without Nickel and PVC*



Dotato di robusta custodia  
anti-urto

*Equipped with a sturdy  
anti-crash case*

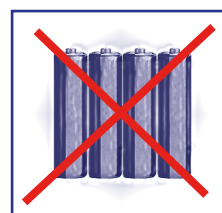

Massima semplicità di utilizzo  
(NO BATTERIE)

*Easy to use  
(NO BATTERY)*

**ECOLOGICO**  
**SENZA MERCURIO**  
ECOLOGICAL MERCURY-FREE

# Accu-Therm<sup>®</sup>

**TERMOMETRO CLINICO**  
ECOLOGICO PERCHÈ SENZA MERCURIO • ALTA QUALITÀ E MASSIMA PRECISIONE • 100% DISINFETTABILE PERCHÈ IN VETRO

**CLINICAL THERMOMETER**  
ECOLOGICAL MERCURY-FREE • HIGH QUALITY AND ACCURACY OF MEASUREMENTS • 100% DISINFECTABLE DUE TO GLASS MATERIAL

## CHE COS'È IL GALINSTAN? WHAT IS GALINSTAN?

È una lega di Gallio, Indio e Stagno; si presenta come un metallo fluido a temperatura ambiente e con caratteristiche simili al mercurio per quanto riguarda la dilatazione al variare della temperatura. Non è tossico e risulta quindi sicuro per l'ambiente, tanto che può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Inoltre in caso di rottura e ingestione accidentale, non viene assorbito dall'organismo e quindi non c'è alcun rischio di avvelenamento (Fonte Geratherm).

*It is a gallium, indium and tin alloy; it looks like a fluid metal at room temperature and has similar features to mercury as far as its expansion is concerned. It is non-toxic and it is environmentally safe, so that it can be disposed of through everyday domestic rubbish. Moreover, should it break or be accidentally ingested, it is not absorbed by the organism, with no risk of poisoning (Source Geratherm).*



Il sostituto del mercurio che rispetta l'ambiente  
The environmentally-friendly mercury substitute

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

<b>Termometro in vetro a colonnina di Gallio</b> <i>Glass gallium thermometer</i>	
<b>Rilevazione della temperatura:</b> <i>Temperature recording:</i>	<b>in 4 minuti circa</b> <i>in 4 minutes approx</i>
<b>Scala graduata:</b> <i>Graduated scale:</i>	<b>da 35 a 42 °C</b> <i>from 35 to 42 °C</i>
<b>Tipi di utilizzo:</b> <i>Modality of use:</i>	<b>orale, rettale e ascellare, in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati</b> <i>oral, rectal and axillar; suitable in a domestic background for adults, children and infants</i>
<b>Precisione:</b> <i>Accuracy:</i>	<b>+/- 0,1 °C</b> <i>+/- 0.1 °C</i>
<b>Divisione:</b> <i>Division:</i>	<b>0,1 °C</b> <i>0.1 °C</i>
<b>Dimensioni:</b> <i>Dimensions:</i>	<b>130 (L) x 11 (P) x 10 (H) mm</b> <i>130 (length) x 11 (width) x 10 (height) mm</i>
<b>Peso:</b> <i>Weight:</i>	<b>7 g</b>
<b>Conforme alla direttiva 93/42 CEE</b> <i>In compliance with Dir. 93/42/EEC</i>	<b>CE</b> 0118
<b>Garanzia:</b> <i>Warranty:</i>	<b>2 ANNI</b> <i>Please refer to your local dealer</i>



	<b>ESPOSITORE da 20 Termometri</b> <i>Display kit including 20 thermometers</i>	<b>Codice Code</b>	 8 018294 008505
		<b>12087</b>	
		<b>Imballo Master carton</b>	

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)

*For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)*

### Distributore / Distributor:

**FLAEM NUOVA S.p.A**  
Elettromedicali/Elettrodomestici  
Via Colli Storici, 221-223-225  
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)  
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287  
E-mail: [info@flaemnuova.it](mailto:info@flaemnuova.it)  
[www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)



**FLAEM NUOVA S.p.A.** è un'azienda con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA



**3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy**  
Phone (39) 02 4120769  
Fax (39) 02 48376295  
E-mail: [info@medexpointernational.com](mailto:info@medexpointernational.com)