

Latty

Tiralatte elettrico professionale

Professional electric breast pump



Per saperne di più



To know more



Specifiche tecniche / Technical specifications

Fabbricante / Manufacturer	Flaem Nuova S.p.A.
Modello / Model	P0117EM
Alimentazione-Potenza / Power supply-Power	230V ~50 Hz 140 VA
Uso / Use	Continuo / Continuous
Rumorosità(a 1 m) / Sound level (at 1 m)	<60 dB (A) approx
Regolatore della frequenza di poppata / Cycle speed knob	Sì / Yes
Regolatore dell'intensità di poppata Expression strength knob	Sì Yes
Biberon applicabili (doppia suzione contemporanea) Applicable Milk Bottles (contemporary double suction)	1 standard, 2 in kit opzionale 1 std, 2 in optional kit
Dimensioni con 1 biberon Dimensions with 1 milk bottle	29,5 x 12,5 x 23,5 h cm 11.6 x 4.9 x 9.25 h in.
Dimensioni con 2 biberon Dimensions with 2 milk bottles	36,5 x 12,5 x 23,5 h cm 14.4 x 4.9 x 9.25 h in.
Conformità Conformity	<p>Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230V ~ 50Hz) / In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V - 50 Hz unit only)</p> <p>In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006</p> <p>Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230V ~ 50Hz) / In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V - 50 Hz unit only)</p>



Accessori in dotazione std / Accessories supplied std

1 biberon da 250 ml con Sistema salva-pompa anti-reflusso - 3 Cuffie S-M-L - 1 Cuffia in Silicone M / 1 Milk bottle of 250 ml with Diaphragm back-flow kit - 3 Breastshield S-M-L - 1 Silicon breastshield M


1 Porta Biberon / 1 Milk bottle holder

Tubetto di collegamento in silicone / Connection tube

Cavo alimentazione staccabile / Detachable power cord

Latty

Tiralatte / Breast Pump	<table border="1"> <tr> <td>Codice Code</td> <td>8 018294 014162</td> </tr> <tr> <td>P600P00</td> <td></td> </tr> </table>	Codice Code	8 018294 014162	P600P00	
Codice Code	8 018294 014162				
P600P00					
Kit Completo "Latty" Complete kit "Latty"	ACO001I				
Kit Completo "Twins" Complete kit "Twins"	ACO002I				
Borsa Trasporto / Carrying bag	15663A0				

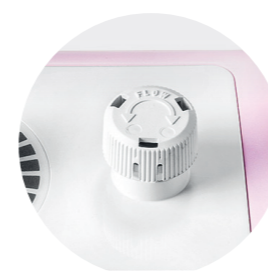

Regolazione dell'intensità di poppata
Adjusting expression strength



Regolazione della frequenza di poppata e stimolazione
Adjusting the cycle speed and the stimulation



3 taglie di coppette rigide disponibili S, M, L
3 rigid breastshields sizes S, M, L

Latty

Tiralatte elettrico professionale

Professional electric breast pump



www.fluem.it



Fabbricante / Manufacturer
FLAEM NUOVA S.p.A
 Via Colli Storici, 221-223-225
 25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
 Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
 E-mail: info@flaemnuova.it
 www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
 è un'azienda con sistema di qualità certificato
 Company with certified quality system

Latty

Tiralatte elettrico professionale

Professional electric breast pump

Cos'è?

Il tiralatte "Latty" di Flaem, è un robusto e affidabile dispositivo elettromedicale particolarmente indicato per l'uso professionale e per il noleggio in farmacia.

Le funzioni di regolazione dell'intensità e della frequenza di poppata di cui è fornito, abbinato al sistema chiuso e anti-reflusso in dotazione, permettono di simulare l'effetto della naturale poppata del neonato, inoltre grazie alla morbida coppa in silicone ad effetto massaggiante, il tiralatte "Latty" rende confortevole ogni seduta anche per la mamma. Il sistema anti-reflusso, rende il nostro dispositivo sicuro, di facile utilizzo e manutenzione.

Può essere dotato di kit aggiuntivo per l'estrazione del latte contemporaneamente da entrambi i seni, ed i biberon possono essere alloggiati nei due supporti facilmente applicabili lateralmente alla struttura.



What's this?

Latty Breast Pump is a resistant electromedical device particularly suitable for the clinical-hospital use and for rental in pharmacies.

The regulation functions of both cycle speed and expression strength combined with the diaphragm system (no-milk spillage into bottles) allow to simulate the natural breastfeeding of the newborn. Furthermore, thanks to a soft-touch silicon breastshield with massaging effect "Latty" makes each session more comfortable for the mother. The diaphragm system, makes the device extremely safe, easy to use and to maintain.

Latty can be purchased with an extra accessory kit allowing to express milk from both breasts at same time. Milk bottles can be placed in 2 holders oppositely located next to device.

Caratteristiche principali e vantaggi

- Dispositivo per l'aspirazione del latte materno
- **Struttura robusta in ABS antiurto, adatta per il noleggio e all'uso clinico-ospedaliero**
- Nuova coppa massaggiante in morbido silicone (Extra + L = M) per una confortevole estrazione del latte
- Regolazione della frequenza di poppata
- Regolazione dell'intensità di poppata
- Possibilità (opzionale) di aspirazione da uno o due seni contemporaneamente
- **Nuovo sistema chiuso e salva-pompa anti-reflusso del latte**
- Semplicità d'uso, pulizia e manutenzione
- **Accessori facilmente lavabili e disinfettabili**
- Pratica e comoda borsa da trasporto (opzionale)

Key features and benefits

- Electric Breast Pump
- **Resistant device made with anti-shock ABS material, suitable for rental and clinical use**
- New massaging soft-touch silicon breastshield for a comfortable milk expression (Extra + L = M)
- Adjusting the cycle speed
- Adjusting expression strength
- Possibility to express milk from one or both breasts at same time (optional)
- **New diaphragm system with no-milk spillage into the pump**
- Ease to use, to clean and to maintain
- **Accessories easily washable and disinfettable**
- Handy and convenient carrying bag (optional)

PHthalates & BPA FREE

È semplice da usare e gli accessori sono facilmente lavabili e disinfettabili a freddo, nei vaporizzatori per biberon o nel microonde tramite il vapore a caldo con gli appositi contenitori.
It is easy to use and accessories are easy to clean and cold disinfettable, either in vaporizers or in microwaves with the dedicated containers.

