




Aspira 40

High vacuum/high flow medical suction device
Aspiratore chirurgico alto vuoto/alto flusso

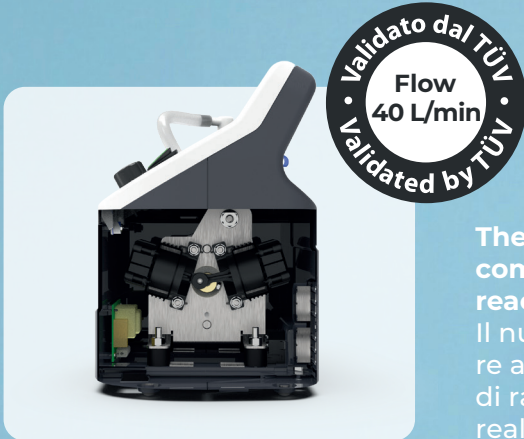

Validato dal TÜV
Flow
40 L/min
Validated by TÜV

The new heavy-duty double compressors pump allow to reach a real 40 L/min flow
Il nuovo potente compressore a doppia pompa permette di raggiungere un flusso reale di 40 L/min



Designed to facilitate cleaning and moving
Progettato per facilitare la pulizia e lo spostamento



Flexible configuration suction unit, available either as a rack or transportable desk-type version
Aspiratore con configurazione flessibile, disponibile sia in versione con carrello che trasportabile da banco



www.flaem.it

MADE
IN ITALY

Aspira 40

Medical suction device / Aspiratore chirurgico

Aspira 40 can be used for various home or hospital applications, as well as in ambulatory, surgery centres, clinics and doctors' practices where a **reliable and precise suction source** is needed. This suction device offers a strong alternative to wall vacuum, as it provides a consistent vacuum level. The heavy-duty twin-pump compressor creates a quiet, robust and long-lasting operation. Aspira 40 is available either as **rack** or **transportable version**: The rack version is the classic version to be attached to a trolley for allowing **mobility** and **handling**, thanks to a special fixing plate and handles design. The rack version can be equipped with high quality **reusable Flaem suction jars** (autoclavable), or with **disposable collecting system** through clamp holders. As **transportable version**, Aspira 40 can be conveniently placed at the patient's **bedside** and be easily moved from one place to another.

Aspira 40 può essere utilizzato per diverse applicazioni domiciliari o in ospedali, centri di chirurgia ambulatoriale, cliniche e studi medici, ovunque sia necessaria una fonte di **aspirazione affidabile e precisa**. Questo dispositivo di aspirazione offre una valida alternativa all'aspirazione a parete, poiché fornisce un livello di vuoto costante. Il compressore a doppia pompa per uso intensivo garantisce un funzionamento silenzioso, robusto e di lunga durata. Aspira 40 è disponibile sia in versione **carrellata** che **trasportabile**. La versione con carrello è la versione classica, pensata per essere fissata a un carrello per garantirne **mobilità** e **maneggevolezza**, grazie a una speciale piastra di fissaggio e a un design con maniglie. La versione carrellata può essere dotata di **vasi di raccolta riutilizzabili Flaem** di alta qualità (autoclavabili) o di un **sistema di raccolta usa e getta** mediante supporti a morsetto. Come versione trasportabile, Aspira 40 può essere comodamente posizionato **accanto al letto** del paziente ed essere facilmente spostato da un luogo all'altro.



The trolley (optional) is equipped with a comfortable handle for easy moving in the medical environment and with a hub to fix up to 4 supporting rings, useful for hosting liner containers (high vacuum / high flow)

Il carrello (opzionale) è dotato di una comoda maniglia per lo spostamento nelle strutture sanitarie e di apposito mozzo per fissare fino a 4 anelli portavaso utili ad ospitare contenitori liner monouso (alto vuoto/ alto flusso)

Aspira 40

Features and benefits / Caratteristiche principali



Medical device 100% engineered and manufactured in Italy
Dispositivo medico interamente progettato e fabbricato in Italia



It can be easily mounted on the trolley (plate and screws included)
Può essere facilmente montato sul carrello (piastra e viti in dotazione)



Selection button for continuous or intermittent operation
Pulsante di selezione per funzionamento continuo e intermittente



Practical pedal for the intermittent use of the aspirator (optional)
Pratico pedale per l'utilizzo intermittente dell'aspiratore (opzionale)



Adjustable vacuum level with display on vacuum gauge
Livello di depressione regolabile e visualizzabile sul vacuometro



Additional jar and jar holder available with quick-release attachment / Vaso e portavasò aggiuntivo disponibile con aggancio rapido

Aspira 40

Technical datasheet / Caratteristiche tecniche

Model Modello	P0720EM/40I + ASP 2 + A005
Max air flow Flusso aria Max	40 L/min high vacuum-high flow (EN ISO 10079-1) 40 L/min alto vuoto-alto flusso (EN ISO10079-1)
Vacuum range Range di vuoto	From -0,10 bar to -0,88 bar Da -0,10 bar a -0,88 bar
Power supply-power Alimentazione-potenza	230V~ 50Hz - 100VA
Use Uso	Continuous / Continuo
Sound level (at 1 m) Rumorosità (a 1 m)	65dB (A) approx
Weight Peso	9,4 lb / 4,3 kg
Set dimensions Dimensioni apparecchio	14.7 x 7.5 x 11 inches / 37 x 19 x 28 cm
Warranty Garanzia	Please refer to your local dealer / 3 ANNI (ITALIA)
Code Codice	AS40P00
Master carton Imballo	Single unit / Singolo (39x21x30 cm)
Barcode	 8 018294 017996
Compliance Conformità	 0051 In compliance with EU 2017/745 Medical Device Regulation and subsequent amendments / Conforme al regolamento 2017/745 (UE) "Dispositivi Medici" e successive modifiche

Accessories included (replaceable) Accessori in dotazione (sostituibili)	Optional accessories / components Accessori opzionali / componenti	Code Codice
Sterilizable 1000 ml collection jar Vaso di raccolta secreti sterilizzabile da 1000 ml	Pedal for intermittent operation Pedale per azionamento intermittente	ACO772P
Sterilizable silicone connection tubing Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili	Trolley kit with connection plate (4 support rings included) Kit carrello con piastra di installazione (4 anelli portavaso inclusi)	ACO773P
Disposable antibacterial, antiviral and hydrophobic filter Filtro antibatterico, antivirale e idrofobico monouso	Additional jar holder Portavaso aggiuntivo	15224A0
Disposable manual suction regulator Comando manuale del flusso aspirato monouso	Single-patient jar 800 ml (not sterilizable) Vaso monopaziente 800 ml (non sterilizzabile)	ACO001A
Power cord Cavo di alimentazione	Additional sterilizable silicone connecting tube (1,3 m) Tubo di collegamento aggiuntivo (1,3 m) in silicone sterilizzabile	ACO802P



Medical Device, aspirator for medical and surgical use, for the aspiration of bodily fluids, pharyngeal aspiration and permanent tracheostomy. Its use must be prescribed by a doctor / Dispositivo Medico, aspiratore per uso medico e chirurgico, per l'aspirazione di fluidi corporei, per aspirazione faringea e per tracheostomia permanente. Il suo utilizzo deve essere prescritto da un medico



 0051
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 San Martino della Battaglia (BS) Italy
Phone (+39) 030 9910168
E-mail: info@gruppo flaem.it
www.gruppo flaem.it

  
FLAEM NUOVA S.p.A
è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system