




Per saperne di più
 To know more

Erogazione con modalità
 "on demand" o continua
 On demand or continuous
 nebulization mode




Controllo luminoso delle funzioni
 Innovative therapy light indicator

- **Acceso / Device On**
- ☀ **Fine trattamento**
End of treatment
- ☀ **Batteria in esaurimento**
Low battery
- **Batteria scarica**
Empty battery

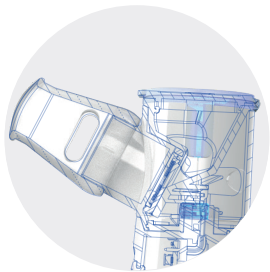

Progettato e prodotto in Italia
 Designed and manufactured in Italy

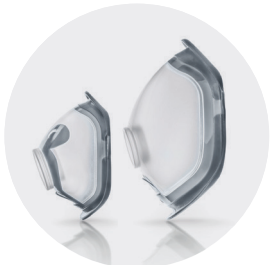

Confortevoli accessori Soft Touch:
boccaglio, mascherine adulto
e pediatriche
 Comfortable Soft Touch
 Accessories: mouthpiece,
 adult and pediatric masks

LightNeb
 Aerosol portatile
 efficiente e silenzioso
 Portable, silent and
 efficient nebulizer



Testato per nebulizzare
 farmaci in sospensione
 come beclometasone
 e budesonide*

Tested to nebulize
 suspensions like
 beclomethasone
 and budesonide*



**La terapia
 dell'apparato
 respiratorio**

The respiratory
 therapy


MADE
 IN ITALY

LightNeb

Aerosol elettronico VMT (Vibrating Mesh Technology) VMT Vibrating Mesh Technology nebulizer

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico. / Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.

*** Test eseguiti presso laboratorio universitario indipendente**
Test performed in an independent university laboratory

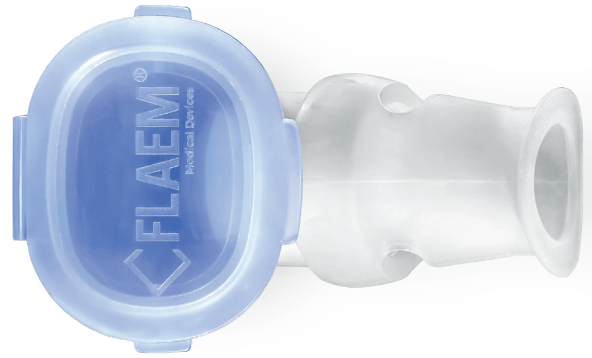

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Alimentazione / Power supply / Power	2.4 - 3VDC - 1.5W 2 x AA batterie alcaline o ricaricabili 2.4 - 3VDC - 1.5W 2 x AA batteries, alkaline or rechargeable
Capacità massima / Maximum fill volume	10ml / 10ml
Frequenza del trasduttore / Transducer frequency	108 KHz / 108 KHz
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	circa 40 dBA / 40 dBA approx.
Dimensioni / Device dimensions	5.0 (lunghezza) x 6.2 (larghezza) x 13.7 (altezza) cm 2.0 (length) x 2.4 (width) x 5.4 (height) in
Peso netto / Device Weight	115g - 4.05 oz
Dimensione borsa di trasporto / Carrying bag dimensions	Pochette 19.0 (lunghezza) x 15.0 (larghezza) cm Pochette 7.5 (length) x 5.9 (width) in
Peso totale (inclusi gli accessori) / Total weight (including accessories)	230 g - 8.11 oz
LED / LED	Blu: ON - Rosso: Batteria in esaurimento o scarica Blue: ON - Red: Low batteries
Auto-spegnimento / Automatic switch off	Dopo 5 minuti / After 5 minutes
Approvazioni Approvals	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU subsequent amendments 2017/745 Medical Device Regulation.
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006

CE 0051

PHthalates & BPA FREE

Caratteristiche Tecniche di nebulizzazione Nebulisation technical features

Velocità di erogazione ml/min / Delivery ml/min	≥ 0.30 (1)
Caratterizzazione MMAD / Characterization MMAD	3.7 - 4.6 µm (2)
Frazione respirabile < 5 µm (FPF) / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	65 % approx (2)

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente / Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity.

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with University of Parma. More detail are available on request.



Accessori / Accessories

Boccaglio in silicone / Soft silicone mouthpiece
Mascherina adulto soft touch / Soft Touch Adult mask
Mascherina pediatrica soft touch / Soft Touch Child mask
2 batterie alcaline AA incluse / 2 AA alkaline batteries included
Pochette / Convenient carrying bag
Tappo di protezione Mesh / Protective Mesh Cap

LightNeb

Codice / Code	MF32E00
Modello / Model	P0318EM
Imballo / Master carton	4 Pezzi / 4 pieces



MD

Made in Italy




FLAEM NUOVA S.p.A
 Via Colli Storici, 221-223-225
 25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
 Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
 E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
 è un'azienda con sistema di qualità certificato
 Company with certified quality system