

Ghibli Plus

Aerosol veloce e compatto
 Fast and compact Nebulizer



Sistema antirovesciamento.
 Impedisce la fuoriuscita del
 farmaco anche in caso di
 capovolgimento accidentale
 dell'ampolla. / No-Spiling
 System. Prevents medication
 from spilling out even if the
 nebuliser is accidentally tipped
 ove.



Confortevoli mascherine
 Soft Touch adulto e
 pediatriche
 Comfortable
 adult and paediatric
 Soft Touch masks



Pratica maniglia
 per un facile
 trasporto
 Convenient
 carrying handle



**La terapia dell'apparato
 respiratorio**
 The respiratory therapy

MADE
 IN ITALY

www.flaem.it

Ghibli Plus



Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico.

Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Uso / Use	Continuo / Continuous	
Alimentazione / Power supply	230V~ 50Hz 130VA	
Filtraggio aria / Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance.	
Portata aria al compressore / Compressor air output	9 l/min (approx)	
Pressione Max / Max pressure	1.8 ± 0.3 bar	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	54 dB (A) (approx)	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	13.5 x 15.5 x 11 cm	
Peso / Weight	1.1 Kg	
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits	 0051
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	
	Marchio di qualità / Quality mark	 Mod. P0211EM F400

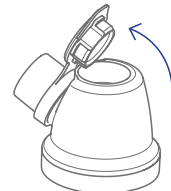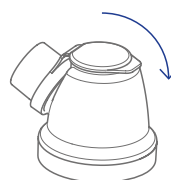

Caratteristiche tecniche del nebulizzatore RF6 Basic² RF6 Basic² nebulizer technical features

	Standard mode	High Speed mode
Erogazione ml/min / Delivery ml/min	0.25 approx. (1)	0.32 approx. (1)
MMAD	3.06 µm (2)	
Frazione respirabile < 5 µm (FPF) / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	73.97% (2)	
Capacità massima / Maximum fill volume	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori della velocità di erogazione possono variare in base alla capacità respiratoria del paziente. (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. (1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Dispensing speed values may vary according to the patient's respiratory capacity. (2) In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request.

Accessori / Accessories

Nebulizzatore RF6 Basic ² / RF6 Basic ² Nebulizer
Boccaglio / Mouthpiece
Mascherina adulto Soft Touch / Soft Touch Adult mask
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch Child mask
Tubo di collegamento da 1 m / 1 m connection tube

Ghibli Plus



Codice / Code	SA04P00
Modello / Model	P0211EM F400 + RF6-12
Imballo / Master carton	8 Pezzi / 8 pieces



Per saperne di più / To know more

