





#### Crosse valve technology

Offre una bassa resistenza per permettere una semplice inalazione del farmaco / Provides very low resistance to allow an easy drug inhalation and exhalation through the chamber

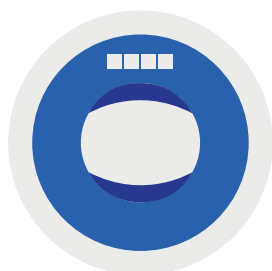

#### Universal inhaler base

Compatibile con tutti i marchi e i tipi di pMDI, integra una funzione fischietto per fornire un feedback udibile all'utente in caso di uso improprio / Compatible with all brands and types of pMDI which integrates a whistle function to provide audible feedback to the user in case of mis-use

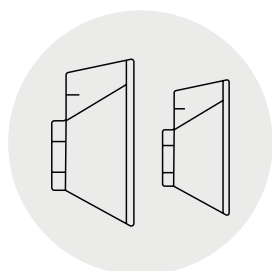

#### Face mask

Maschere in silicone anatomiche e comode fornite in 2 misure: piccola e media / Anatomical and comfortable silicon mask provided in 2 measures: small and medium



#### Antistatic chamber

- Trasparente, per consentire una chiara visione del movimento della valvola e una conferma del corretto utilizzo
- Antistatico, per aiutare a massimizzare il tempo di sospensione dell'aerosol
- Senza BPA, ftalati, lattice o PVC /
- Transparent, to allow a clear view of valve movement and a direct confirmation of correct usage
- Antistatic, to help maximise aerosol suspension time
- BPA, phalates, latex or PVC free

## Zeffiro

Distanziatore antistatico per inalatori spray predosati

Anti-static Space Chamber for Metered-Dose Inhalers (MDI)



MADE IN ITALY

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

# Zeffiro

**Dispositivo medico distanziatore per aerosol destinato all'uso nel trattamento della malattia polmonare ostruttiva cronica e dell'asma con un dispositivo di inalazione assistita da farmaci**  
 Spacer for aerosol is a medical device intended for use by treating chronic obstructive pulmonary disease and asthma with medicine-assisted inhalation device



## Caratteristiche tecniche / Technical features

Camera di espansione da 175ml / Expansion chamber volume 175ml

Fornito con mascherine in morbido silicone in due taglie: adulto e pediatrica / Supplied with masks made in soft silicone in two different sizes: adult and paediatric

Cross valve technology: dotato di due valvole per ottimizzare i flussi in inspirazione ed espirazione, ed evitare dispersione del farmaco / Provided with cross valve technology which optimizes inspiration and expiration air flow, in order to avoid drug losses

Il tappo posteriore è compatibile con tutti i tipi di pMDI ed integra una funzione fischietto per fornire un feedback udibile all'utente in caso di uso improprio / The base is compatible with all types of pMDI and integrates a whistle function to provide audible feedback to the user in case of mis-use

Il boccaglio può essere utilizzato direttamente oppure abbinato ad una delle mascherine in silicone fornite / Mouthpiece putlet can be used directly or connected with one of the masks in silicone provided

## Conformità / Compliance

Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device and subsequent amendments



Esente da ftalati. In conformità a Reg. (CE) n.1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no.1907/2006



Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd.  
 West Part of Yitianmen Street, Hi-tech Zone, Taian, Shandong, China 271000



Lotus NL B.V.  
 Koningin Julianaplein 10, Te Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

## Zeffiro



Codice / Code	SPC04
Modello / Mode	DL-08B
Imballo / Packaging	50pz / 50pcs

