

Rhino Clear Sprint

è FLAEM®

DAL 1966
PRODOTTO ITALIANO


*vivere bene
respirando meglio*

Il naso libero facilmente

Doccia Nasale utilizzabile
con soluzione salina o con
farmaci per terapia aerosolica

Funzionamento a Batterie AA



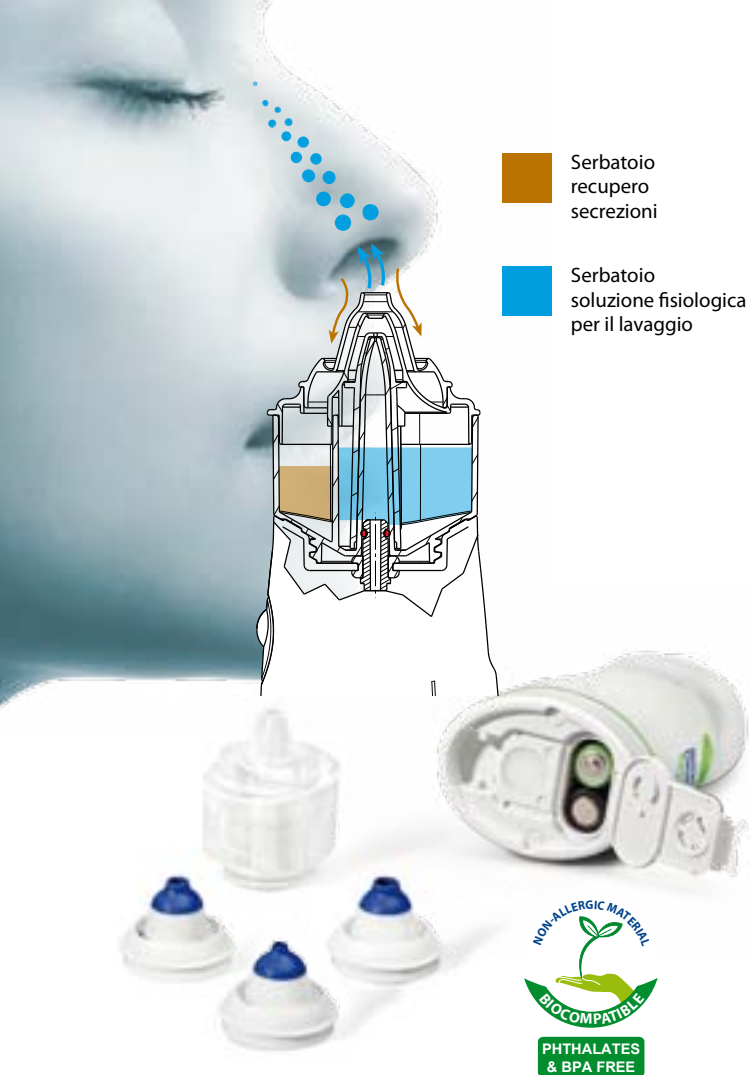

Doccia nasale ricaricabile Rhino Clear Sprint

*L'efficacia del lavaggio nasale
per un respiro libero, ovunque.*

La linea dei prodotti FLAEM per le alte vie respiratorie (docce nasali) si sviluppa con RHINO CLEAR SPRINT, la doccia nasale efficace e con un'elevata compliancy su adulti e bambini con alimentazione a normali batterie stilo.

Questo conferisce alle caratteristiche di micronizzazione studiate per la nebulizzazione nelle alte vie respiratorie (naso e faringe) sviluppate sugli altri apparecchi della linea FLAEM: Rhino Clear e Rhino Clear Mobile, una completa portabilità per un utilizzo proprio nel momento in cui se ne senta la necessità ad esempio in caso di crisi per riniti allergiche od ostruzioni nasali in genere.

Una corretta igiene nasale inoltre è alla base di un'efficace prevenzione delle affezioni dell'apparato respiratorio mantenendo pulita l'aria all'interno delle cavità nasali prima che questa raggiunga i polmoni contribuendo a prevenire le affezioni polmonari e patologie da raffreddamento in genere.

Il trattamento con doccia nasale Rhino Clear Sprint eroga, come sugli altri modelli della linea, una nebulizzazione specifica per rimanere nell'ambito dei distretti del rinofaringe, e non scendere sino al livello polmonare come farebbe il nebulizzato erogato dai normali apparecchi per aerosol.

Le docce nasali sono particolarmente adatte al trattamento delle rino-faringiti, permettendo la rimozione di eventuali essudati mucosi che nel bambino rappresentano un problema non trascurabile.

Il lavaggio non necessita dell'utilizzo di farmaci e viene normalmente effettuato utilizzando le comuni soluzioni fisiologiche isotoniche e ipertoniche. Il lavaggio nasale è **efficace e confortevole sia nell'adulto, che nel bambino** anche grazie ai tre adattatori nasali realizzati in materiale morbido, di cui RHINO CLEAR SPRINT è fornito di serie.

Il trattamento con la doccia nasale è molto ben tollerato dai bambini e, da uno studio effettuato dalla prof.ssa B. Bergamini della Facoltà di Pediatria dell'Università di Modena e Reggio Emilia, risulta che "Nel bambino con rino-sinusite cronica, praticamente tutti i sintomi risultano migliorati già dopo la prima settimana di trattamento e dopo la terza settimana il miglioramento è ulteriormente evidente".

La Doccia Nasale Flaem RHINO CLEAR SPRINT oltre a proteggere la salute del vostro respiro, non ha particolari controindicazioni, infatti è realizzata in **materiali Biocompatibili e anallergici (testati dai laboratori Biochem)**. Rispetta infine l'ambiente, per l'adozione di componenti conformi alle più recenti direttive mediche.

La continua ricerca Flaem per la sicurezza dei propri prodotti ha condotto alla realizzazione di RHINO CLEAR SPRINT **senza l'utilizzo di Ftalati nei materiali plastici** di produzione secondo la direttiva 93/42/CEE e successivo aggiornamento 2007/47/CE.

Gli Ftalati sono sostanze chimiche utilizzate nella lavorazione delle plastiche riguardo le quali numerosi Stati Membri dell'Unione Europea (Italia compresa) hanno adottato raccomandazioni intese a ridurre o a limitare l'impiego di dispositivi medici contenenti Ftalati pericolosi sui bambini, sulle donne in gravidanza e in allattamento e su altri pazienti a rischio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	2 Batterie AA (Alcaline / Ricaricabili)
Camera di nebulizzazione	da 15 ml max, estraibile e completamente lavabile
Tempo di nebulizzazione di 10 ml di Soluzione Fisiologica Na Cl 0,9%	Circa 2 minuti (1 ml in c.ca 12 sec.)
Dimensioni	7,2 x 5,3 x 15,8 h cm
Peso doccia	185 g
Conforme alla direttiva 93/42/CEE	
Confezione Singola con: 1 Doccia nasale, 3 Adattatori nasali e 2 Batterie AA Alcaline	DR00P00 8 018294 010911

Patented and Patent Pending Product

14728A0 - Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 02/2012 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.



Fabbricante:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.flaem.it