



**FLAEM**<sup>®</sup>

*è vicino al tuo bambino*

 DAL 1966   
PRODOTTO ITALIANO

## *Aspiratore nasale per bambini*

Igienico, non richiede  
aspirazione con la bocca

Facile utilizzo

Delicato, con morbido nasale



**PHTHALATES  
& BPA FREE**

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)




## Aspiratore nasale per bambini

L'Aspiramuco per Bambini Baby Flaem per il suo funzionamento non necessita dell'aspirazione da parte della mamma. Il suo sistema brevettato di funzionamento prevede infatti la semplice azione di pressione con il dito sullo stantuffo.

Al suo rilascio, la depressione che si viene a creare aspira delicatamente il muco. Tutto ciò senza sfilare il dispositivo dal naso del bambino, infatti la sua configurazione permette, all'atto di chiusura dello stantuffo, l'uscita dell'aria dalle apposite fessure predisposte alla base del corpo centrale senza provocare pericolose pressioni all'interno del naso del bambino.

La facilità di smontaggio e riassetaggio del dispositivo, permette inoltre una facile pulizia e sanificazione dell'intero dispositivo.

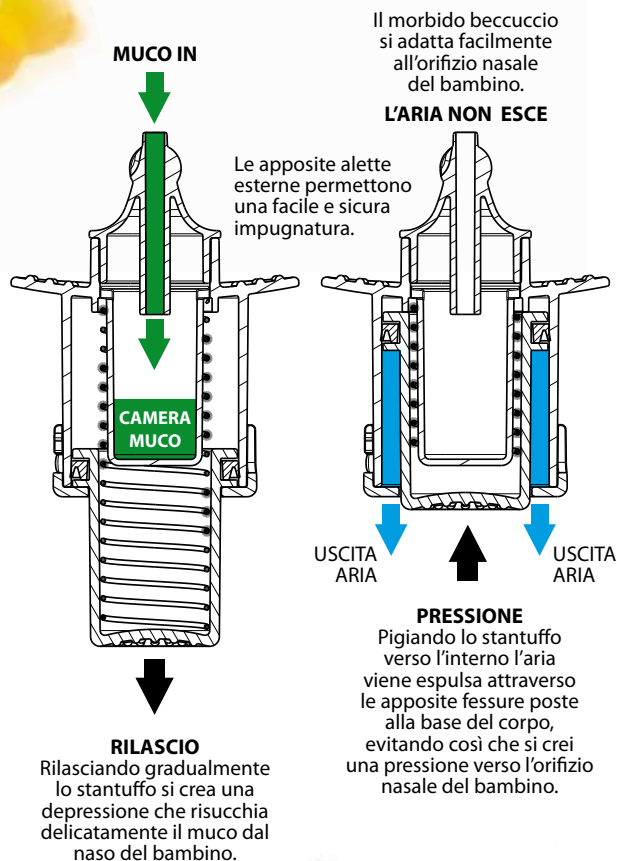

	Box Espositore da 6 pezzi	<b>ACO510P</b>	 8 018294 010898
	Confezione Singola con 1 Aspiratore 2 Morbidi Beccucci	<b>ACO423P</b>	 8 018294 010904

Patented and Patent Pending Product 14730A0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.

SINCE 1966  
**MADE IN ITALY**

**FLAEM**  
a healthy lifestyle

Fabbricante:  
FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it  
**www.flaem.it**

Numero Verde  
**800 236622**  
SERVIZIO CLIENTI FLAEM

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system

CERTIFICATO N. 9120, FLAE  
CERTIFICATO N. 9124, FLOZ