

5

Anni di Garanzia
Years warranty

DAL 1966
ITALIAN DESIGN

Olly Vaporizer

by **FLAEM**[®]



Umidificatore a vapore caldo Warm Steam Vaporizer

- Sicuro, omologato da: INTERTEK GS
- Flusso vapore regolabile
- Luce notturna
- Adatto anche per la diffusione di oli essenziali
- Capacità serbatoio 4,5 L
- Spegnimento automatico
- Safe, approved by INTERTEK GS
- Adjustable steam flow
- Night-light
- Suitable for vaporizing essential oils
- 4,5 liter capacity
- Automatic shut off when it runs out of water



Esce vapore sterile pre-raffreddato
Delivering pure pre-cooled steam



Facile da pulire
Easy to clean



14 Ore di autonomia
Hours operation



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Alimentazione/Potenza <i>Power supply/Power</i>	220-240 Vac / 50Hz; 240-260W
Capacità serbatoio <i>Reservoir capacity</i>	4,5 litri approx. <i>Approx. 4.5 litres</i>
Autonomia <i>Operation time</i>	14 ore / hours
Dimensioni L x P x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i>	27 x 29 x 22
Peso (a secco) <i>Weight (empty)</i>	1.3 Kg
Codice <i>Code</i>	HE21E00
Modello <i>Model</i>	P0413ED
Imballo <i>Master carton</i>	n° 2 pz. <i>2 pieces</i>

OMOLOGAZIONI APPROVALS

CE Marking: in conformity with EU Directive 2006/95 EEC

Approval Mark:  

Safety Electrical Standards: Europe:
EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008
and EN 60335-1:2012.

Australia/New Zealand:

AS/NZS 60335.2.98:2005 + A1:2009;

AS/NZS 60335.1:2011 + A1:2012.

EMC Standards: EN 55014-1:2006 + A1:2009;


EN 55014-1:1997 + A1:2001 + A2:2008;

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009;

EN 61000-3-3:2013



1. Ampio contenitore portaessenze
Large cup for essential oils
2. Pratico indicatore di livello MAX
MAX water level mark
3. Capacità 4,5 litri
Capacity: 4.5 liters
4. Regolazione flusso vapore
Adjustable steam flow
5. Elemento riscaldante con rivestimento antiaderente per facilitare la pulizia
Heating element with non-stick coating for easy cleaning
6. Innovativo sistema raffredda vapore
Innovative steam cooling system
7. Luce notturna
Night-light

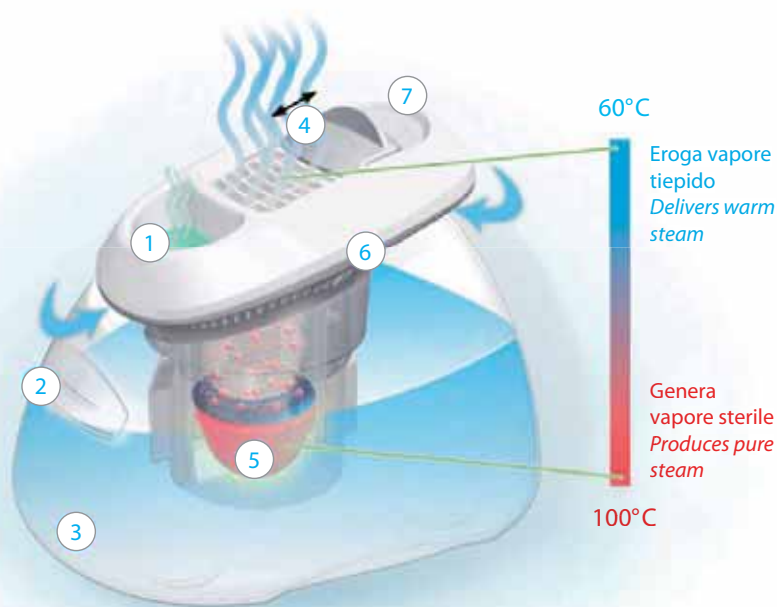

Modello depositato

16421A0-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2014 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

 medexpo
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flam.it

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM