



**Regolazione dell'intensità di poppata**  
Adjusting expression strength



**Regolazione della frequenza di poppata e stimolazione**  
Adjusting the cycle speed and the stimulation



**3 taglie di coppette rigide disponibili S, M, L**  
3 rigid breastshields sizes S, M, L

## Latty

**Tiralatte elettrico professionale**  
Professional electric breast pump



[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

# Latty

## Tiralatte elettrico professionale Professional electric breast pump



### Cos'è?



Il tiralatte "Latty" di Flaem, è un robusto e affidabile dispositivo elettromedicale particolarmente indicato per l'uso professionale e per il noleggio in farmacia.

Le funzioni di regolazione dell'intensità e della frequenza di poppata di cui è fornito, abbinato al sistema chiuso e anti-reflusso in dotazione, permettono di simulare l'effetto della naturale poppata del neonato, inoltre grazie alla morbida coppa in silicone ad effetto massaggiante, il tiralatte "Latty" rende confortevole ogni seduta anche per la mamma. Il sistema anti-reflusso, rende il nostro dispositivo sicuro, di facile utilizzo e manutenzione.

Può essere dotato di kit aggiuntivo per l'estrazione del latte contemporaneamente da entrambi i seni, ed i biberon possono essere alloggiati nei due supporti facilmente applicabili lateralmente alla struttura.

### Caratteristiche principali e vantaggi

- Dispositivo per l'aspirazione del latte materno
- **Struttura robusta in ABS antiurto, adatta per il noleggio all'uso clinico-ospedaliero**
- Nuova coppa massaggiante in morbido silicone (Extra + L = M) per una confortevole estrazione del latte
- Regolazione della frequenza di poppata
- Regolazione dell'intensità di poppata
- Possibilità (opzionale) di aspirazione da uno o due seni contemporaneamente
- **Nuovo sistema chiuso e salva-pompa anti-reflusso del latte**
- Semplicità d'uso, pulizia e manutenzione
- **Accessori facilmente lavabili e disinfettabili**
- Pratica e comoda borsa da trasporto (opzionale)

### What's this?

Latty Breast Pump is a resistant electromedical device particularly suitable for the clinical-hospital use and for rental in pharmacies.

The regulation functions of both cycle speed and expression strength combined with the diaphragm system (no-milk spillage into bottles) allow to simulate the natural breastfeeding of the newborn. Furthermore, thanks to a soft-touch silicon breastshield with massaging effect "Latty" makes each session more comfortable for the mother. The diaphragm system, makes the device extremely safe, easy to use and to maintain.

Latty can be purchased with an extra accessory kit allowing to express milk from both breasts at same time. Milk bottles can be placed in 2 holders oppositely located next to device.

### Key features and benefits

- Electric Breast Pump
- **Resistant device made with anti-shock ABS material, suitable for rental and clinical use**
- New massaging soft-touch silicon breastshield for a comfortable milk expression (Extra + L = M)
- Adjusting the cycle speed
- Adjusting expression strength
- Possibility to express milk from one or both breasts at same time (optional)
- **New diaphragm system with no-milk spillage into the pump**
- Ease to use, to clean and to maintain
- **Accessories easily washable and disinfected**
- Handy and convenient carrying bag (optional)

  
**PHthalates  
& BPA FREE**

Per saperne di più




To know more



**È semplice da usare e gli accessori sono facilmente lavabili e disinfettabili a freddo, nei vaporizzatori per biberon o nel microonde tramite il vapore a caldo con gli appositi contenitori.**

It is easy to use and accessories are easy to clean and cold disinfected, either in vaporizers or in microwaves with the dedicated containers.



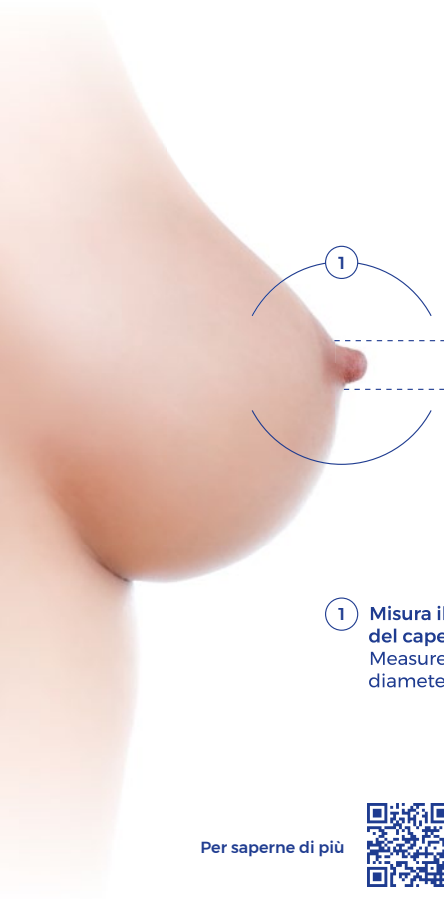


**S**  
Ø ≤ 20 mm

**M**  
Ø ≤ 23 mm

**Extra**  
Coppa in silicone  
Silicone breast shield


**L**  
Ø ≤ 26 mm

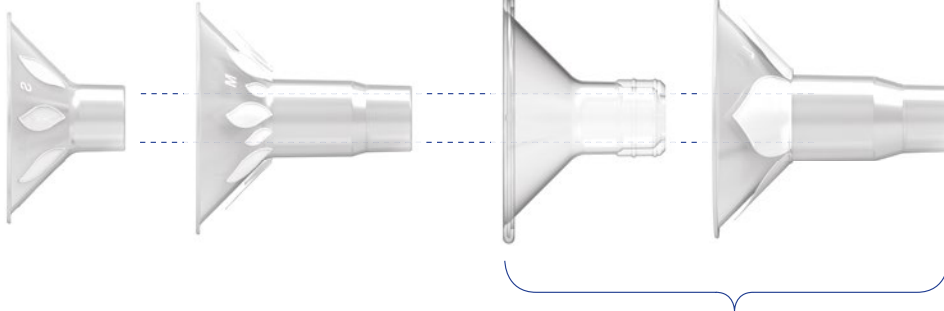

① Misura il diametro del capezzolo alla base  
Measure the nipple diameter at its base

② Utilizza la taglia che rientra nella misura  
Use the size that is closest to the measure

**Extra + L = M**

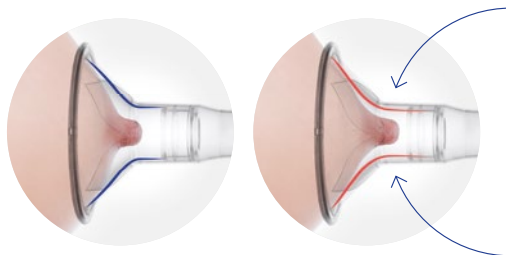

Effetto massaggiante / Massaging effect

Per saperne di più



To know more



# Latty

## Tiralatte elettrico professionale

### Professional electric breast pump



Per saperne di più



To know more



### Specifiche tecniche / Technical specifications

Fabbricante / Manufacturer	Flaem Nuova S.p.A.	
Modello / Model	P0117EM	
Alimentazione-Potenza / Power supply-Power	230V ~50 Hz 130 VA	
Uso / Use	Continuo / Continuous	
Rumorosità(a 1 m) / Sound level (at 1 m)	53 dB (A) approx	
Regolatore della frequenza di poppata / Cycle speed knob	Sì / Yes	
Regolatore dell'intensità di poppata Expression strength knob	Sì Yes	
Biberon applicabili (doppia suzione contemporanea) Applicable Milk Bottles (contemporary double suction)	1 standard, 2 in kit opzionale 1 std, 2 in optional kit	
Dimensioni con 1 biberon Dimensions with 1 milk bottle	29,5 x 12,5 x 23,5 h cm 11.6 x 4.9 x 9.25 h in.	
Dimensioni con 2 biberon Dimensions with 2 milk bottles	36,5 x 12,5 x 23,5 h cm 14.4 x 4.9 x 9.25 h in.	
Conformità Conformity	Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230V - 50Hz) / In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V - 50 Hz unit only)	CE 0051
	In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230V - 50Hz) / In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V - 50 Hz unit only)	

### Accessori in dotazione std / Accessories supplied std


1 biberon da 250 ml con Sistema salva-pompa anti-reflusso - 3 Cuffie S-M-L - 1 Cuffia in Silicone M / 1 Milk bottle of 250 ml with Diaphragm back-flow kit - 3 Breastshield S-M-L - 1 Silicon breastshield M

1 Porta Biberon / 1 Milk bottle holder

Tubetto di collegamento in silicone / Connection tube

Cavo alimentazione staccabile / Detachable power cord

### Latty

Tiralatte / Breast Pump	Codice Code	
	P600P00	
Kit Completo "Latty" Complete kit "Latty"	ACO001I	
Kit Completo "Twins" Complete kit "Twins"	ACO002I	
Borsa Trasporto / Carrying bag	15663A0	