

MADE IN  
ITALY

# Lella la coccinella

THE LADYBUG

*Simpatia da  
respirare!*

**SISTEMA  
COMPLETO PER  
AEROSOLTERAPIA**

COMPLETE SYSTEM  
FOR AEROSOL THERAPY

Since 1966  
**FLAEM**<sup>®</sup>  
Medical Devices

## Doccia Nasale Rhino Clear

Rhino Clear nasal wash



**Trattamento specifico delle Alte vie respiratorie**  
Treatment of upper airways

## Caratteristiche tecniche DOCCIA NASALE

NASAL WASH technical features

Tempo di nebulizzazione di 10 ml NaCl Nebulisation time for 10 ml NaCl	2' 10" (minutes)
Valori rilevati con procedura interna Flaem Results are as per Flaem procedure	10 ml
MMAD	48 µm
% < 10 µm	3.2
Valori rilevati con sistema Laser Malvern Mastersizer (presso un laboratorio esterno certificato) Test results were derived using a Malvern Mastersizer Laser System (in a certified laboratory)	
Capacità massima Maximum fill volume	

## Ampolla RF6 basic<sup>2</sup>



RF6 basic<sup>2</sup> nebuliser



**Trattamento dell'intero tratto respiratorio**  
Treatment of the whole respiratory tract

## Caratteristiche tecniche NEBULIZZAZIONE


NEBULISATION technical features

			
		STANDARD MOD.	HIGH SPEED MOD.
Erogazione <sup>(1)</sup> Delivery <sup>(1)</sup>	ml/min	0.32	0.42
MMAD <sup>(2)</sup>	µm	3.6	3.6
Frazione respirabile < 5 µm <sup>(2)</sup> Breathable fraction < 5 µm (FPF) <sup>(2)</sup>	%	66	67
(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente. (1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5 Value shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity.			
(2) Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo EN 13544-1 per apparecchi da aerosol terapia. Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta (2) In vitro characterization carried out at the Inamed Research GmbH & Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for aerosol therapy units. Further details are available upon request.			
Capacità massima Maximum fill volume		8 ml	

## Caratteristiche tecniche

Technical features

Mod. P0406EM F700

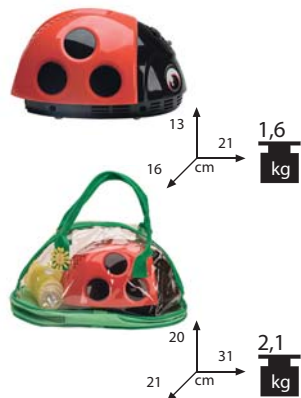

**Alimentazione/Potenza:** 230V~ 50Hz 140VA  
**Power supply/Power:** Other voltages available on request

## Omologazioni

Approvals

<b>Compressore silenzioso</b> (esente da lubrificazione e da manutenzione) Silenced compressor (designed for use without lubrication or maintenance)	
<b>Filtraggio aria:</b> Air filtration:	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
<b>Portata aria al compressore:</b> Compressor air output:	10 l/min (approx).
<b>Pressione Max:</b> Max pressure:	2,6 ± 0,4 bar (approx).
<b>Rumorosità (a 1 m):</b> Sound level (at 1 m):	55 dB(A) (approx.)
<b>Garanzia:</b> Warranty:	5 ANNI Please refer to your local dealer

Conforme alla **Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici"** (solo per unità 230 V ~ 50 Hz)  
In compliance with **93/42/EEC Medical Device Directive** (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)

In conformità alla Norma Europea **EN 10993-1** "Valutazione Biologica dei dispositivi medici"  
In compliance with **European standard EN 10993-1** Biological evaluation of medical devices

Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230 V ~ 50 Hz)  
In compliance with **std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11** (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



## Accessori in dotazione

Accessories	Cod.
Kit Ampolla RF6 basic <sup>2</sup> con Boccaglio	ACO367P
Doccia Nasale Rhino Clear	08208
Tubo di collegamento da 2 m	ACO225P
Mascherina adulto in PVC	ACO79
Mascherina pediatrica in PVC	ACO89
Kit ricambi filtri aria (2 pezzi)	ACO439P
Favola per bambini	11775
Comoda borsa contenitore	11296



**LELLA LA COCCINELLA F700**

**Codice**  
Code

**C003P00**

**Imballo**  
Master carton

**n° 6 Pz**  
6 pieces



8 018294 008246

11799B0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2020 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante / Manufacturer:  
**FLAEM NUOVA S.p.A**  
Via Colli Storici, 221-223-225  
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)  
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287  
E-mail: info@flaemnuova.it  
www.flaemnuova.it



**FLAEM NUOVA S.p.A.**  
è un'azienda con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system